

pH 传感器 SE 102-AN

具有内置温度探头的 pH 传感器

带玻璃杆的 SE 102-AN 传感器是一种可靠的传感器，用于在实验室和现场进行精确的 pH 测量。内置有一个 Pt1000 温度探头。可以补充电解质。

应用领域

精密测量、化工、
侵蚀性介质、质量控制


产品详情

- 液体电解质，可以补充
- 陶瓷隔膜
- 内置温度探头
- 低阻抗 pH 玻璃电极，即使在低温下也能进行测量，碱度误差很小

技术参数

pH:	0~14
温度:	-5~100°C / 23~212°F
温度探头:	Pt1000
参照系统:	Ag/AgCl
电解质:	液体, 3 mol/l KCl, 可以补充
隔膜:	陶瓷
pH 玻璃电极:	低阻抗, 碱度误差很小
杆材料:	玻璃
杆长:	110 mm / 4.33 英寸
杆直径:	12 mm / 0.47 英寸
电极头:	实验室电极头, 可装入 Portavo 护套中
电缆:	固定电缆 (长度: 1 m / 3.28 ft)

尺寸图

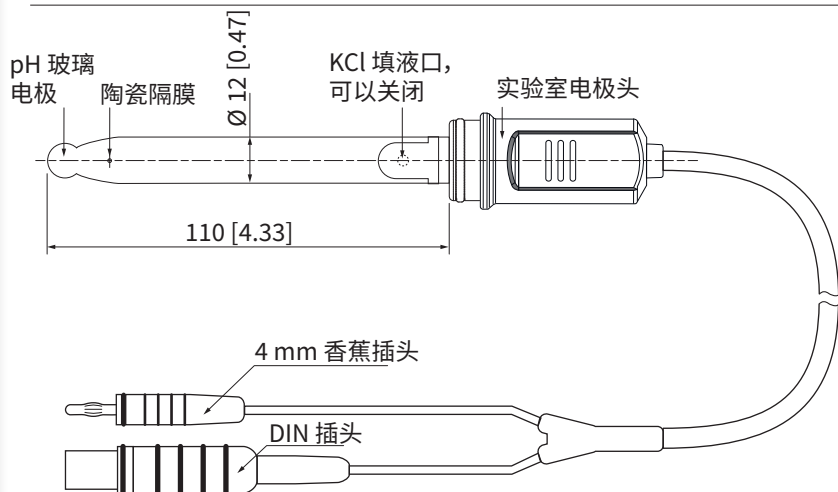

所有尺寸单位 mm [英寸]

pH 传感器 SE 102-AN

产品系列

传感器	长度	订货编号
pH 传感器 SE 102-AN	110 mm	SE 102-AN

CaliMat 缓冲溶液 (20°C)	数量	订货编号
pH 值 2.00 ± 0.02	250 ml	CS-P0200/250
pH 值 4.00 ± 0.02	250 ml	CS-P0400/250
	1000 ml	CS-P0400/1000
	3000 ml	CS-P0400/3000
pH 值 7.00 ± 0.02	250 ml	CS-P0700/250
	1000 ml	CS-P0700/1000
	3000 ml	CS-P0700/3000
pH 值 9.00 ± 0.02	250 ml	CS-P0900/250
	1000 ml	CS-P0900/1000
	3000 ml	CS-P0900/3000
pH 值 12.00 ± 0.05	250 ml	CS-P1200/250

用于存放在保湿帽中的电解质溶液	数量	订货编号
KCl, 3 mol/l	250 ml	ZU 0960